


QUINTESSENZA EDIZIONI S.r.l. - Via Ciro Menotti 65 - 20017 Rho (Mi) - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/M

# IMPLANTOLOGIA

E IMPLANTOPROTESI — La rivista per il clinico

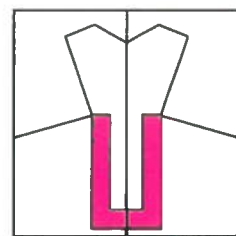

ANNO 15  
GIUGNO 2017

2/17

 QUINTESSENCE PUBLISHING

## Way Slim: l'impianto assolutamente incisivo

Way Slim 3.0 mm è l'ultimo nato nella linea way, il sistema implantare Geass caratterizzato da un unico protocollo chirurgico e superficie al laser Synthegra.

Appositamente studiato per gli spazi anatomici ristretti, way Slim è l'impianto ottimale per gestire zone quali gli incisivi inferiori e i laterali superiori, grazie al diametro da 3 mm e a caratteristiche che lo rendono unico.

Le fresature longitudinali, ad esempio, aumentano il potere automaschiante ed evitano l'utilizzo di maschiatori, mentre il doppio filetto riduce il numero di giri necessari all'inserzione e permette di velocizzare il posizionamento implantare; la semplicità del protocollo è assicurata dai soli due passaggi di frese.

Way Slim mantiene alcune caratteristiche vincenti del sistema way, come la connessione conica interna a base esagonale, che riduce l'infiltrato batterico e rende stabile l'accoppiamento impianto moncone e la platform switching, che mantiene l'ampiezza biologica e riduce il riassorbimento osseo perimplantare.

Altro plus presente su way Slim, come su tutti gli impianti way, è Synthegra, la superficie al laser brevettata da Geass che agisce su due fronti: combatte la perimplantite e al tempo stesso promuove l'osteointegrazione nel lungo termine.

Way Slim rappresenta quindi sotto tutti i punti di vista la risposta ideale per gestire più facilmente i casi caratterizzati da spazi anatomici ristretti, per i quali i diametri tradizionali richiederebbero delle soluzioni alternative più complesse. Ancora una volta Geass offre una soluzione progettuale unica, che completa la gamma way e si rivela indispensabile per ogni professionista attento a offrire soluzioni vincenti ai propri pazienti.



*Per maggiori dettagli*

*GEASS srl*

*Via Madonna della Salute 23*

*33050 Pozzuolo del Friuli (UD)*

*info@geass.it*